

Manual de Configurações do WebSocialSaúde – Serviço Hórus

Por Claiton Nazaret – Programador Elotech

Este manual contempla a instalação e configuração do serviço Hórus via SOAP PHP.

Seguindo o Manual do [Roteiro de Uso - v 1.8.pdf](#) disponibilizado pelo Ministério da Saúde, o serviço do Web Service Hórus faz conexão direta via SOAP pelas Url's dos ambientes:


Produção: <http://horusws.saude.gov.br/horus-wsservice/HorusWSService/HorusWS?wsdl>

Homologação: <http://horusws.treinamento.saude.gov.br/horus-ws-service/HorusWSService/HorusWS?wsdl>

Por padrão essas url's já estão cadastradas no sistema, sendo necessária uma alteração de código caso seja alterada.

As configurações do sistema para a utilização do serviço Hórus encontra-se abaixo descritas:

Figura F.01

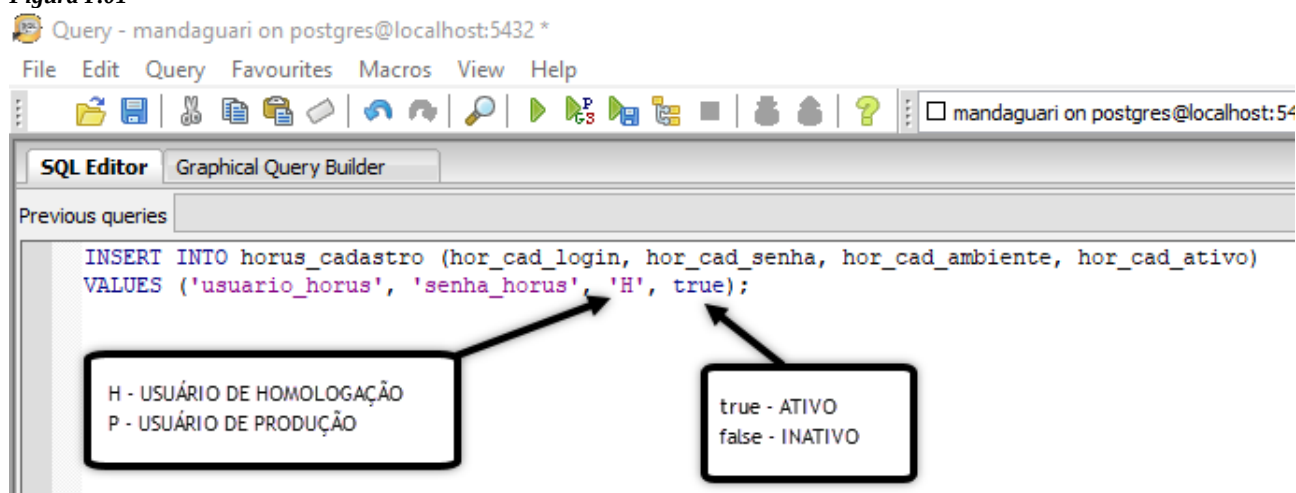

As configurações de usuário e senha do hórus são feitas através de insert diretamente no banco na tabela 'horus_cadastro', trocando os valores para os corretos (Figura F.01).

INSERT INTO horus_cadastro (hor_cad_login, hor_cad_senha, hor_cad_ambiente, hor_cad_ativo) VALUES('usuario_horus', 'senha_horus', 'H', true);

(Atenção) Homologação redirecionará para o usuário de testes enquanto que produção é direcionado para o usuário real do servidor de produção

Manual de Configurações do WebSocialSaúde – Serviço Hórus

Por Claiton Nazaret – Programador Elotech

Figura F.02

Configurações | Software de Ge X +

localhost/WebSocialSaude/zf/configuracao

AGENDAMENTO DEFAULT **FARMÁCIA** LABORATORIO LEITO MATERIAIS PACIENTE PRONTUÁRIO SI-PNI USUARIOS

Dia de Exportação Horus:

HORUS Modo Produção: ☐ Sim ☒ Não

Horus Sincrono?: ☒ Sim ☐ Não

Listar somente prod. / saldo?: ☒ Sim ☐ Não

Periodo de Duração dos Medicamentos: ☒ Sim ☐ Não

Selecionar lote de medicamentos automático: ☐ Sim ☒ Não

Tempo para Historico do paciente:

Validade da receita médica(dias):

Valor na via de medicamentos: ☐ Sim ☒ Não

Via de Medicamentos: ☒ Sim ☐ Não

Salvar (CTRL+S)

Alterar o serviço Hórus para "Produção" quando os testes forem concluídos.

Por enquanto, o WebSocialSaude somente suporta a versão Síncrona do servidor Hórus, onde é possível enviar em tempo real as movimentações.

Nas configurações do sistema (Figura F.02), selecionar as opções de Modo (Produção para servidor real do Hórus ou Homologação para servidor de testes) e o tipo de comunicação síncrona ou assíncrona. Atualmente as implementações foram feitas para o modo síncrono, onde os dados são enviados em tempo real para o servidor do hórus.

Produto

Figura F.03

MATERIAIS

Opções de Cadastro

VOLTAR

Cadastro de Produto

Nome: ALBENDAZOL 400MG CP

Código DCB:

Descrição DCB:

Tipo de Produto Hórus: BÁSICO

Código CATMAT: BR0437668U0067

Concentração:

Grupo: MEDICAMENTOS

Fracionado: ☐ SIM ☐ Não

Tipo do Produto: Medicamentos

Unidade de Medida: COMPRIMIDO

Portaria Psicotrópico: ---

ex. BR0000000000000000

Deve-se informar o Tipo de Produto Hórus (Básico, Especializado, Estratégico e Rename) e o código CATMAT (Obrigatório quando for selecionado o tipo)

No cadastro de produto, selecione a opção “Tipo de produto Hórus” para definir qual é o tipo de produto que será enviado. A opção de cadastro do código CATMAT será visualizada para edição conforme o exemplo mostrado ao lado do campo em vermelho. (Figura F.03)

Manual de Configurações do WebSocialSaúde – Serviço Hórus

Por Claiton Nazaret – Programador Elotech

Figura F.04

Cadastro de Fornecedores

Nome:

Nome Fantasia:

Tipo Pessoa: --- SELECIONE --- ▾

Endereço:

CEP:

Cidade:

UF: --- SELECIONE --- ▾

Telefone:

Fax:

CNPJ:

Inscrição Est.:

RG:

CPF:

E-mail:

Home Page:

Contato:

O C.N.P.J. do fornecedor deve ser corretamente informado pois é obrigatório na entrada de produtos.

O CNPJ do fornecedor deve ser devidamente cadastrado pois no serviço Hórus para entrada de produtos este campo é obrigatório. (Figura F.04)

Figura F.05

Cadastro de Fabricante

Descrição: ABBOTT

C.N.P.J.: 00.530.493/0001-71

Endereço:

O C.N.P.J. do fabricante deve ser devidamente informado para a entrada de produtos.

O Fabricante é obrigatório quando é informada a entrada de produtos no serviço Hórus e deve ser preenchida no cadastro de fabricante conforme (Figura F.05)

Manual de Configurações do WebSocialSaúde – Serviço Hórus

Por Claiton Nazaret – Programador Elotech

Setor

Figura F.06

Adicionar Setor/Centro Estocador

Status: ATIVO

Centro Estocador: SIM

Descrição:

Unidade: --- SELECIONE ---

Tipo de Unidade Hórus: --- SELECIONE ---

Exibe Alerta de Estoque: --- SELECIONE ---

Dispensação: --- SELECIONE ---

Distribuidor: --- SELECIONE ---

Liberado Transferência: --- SELECIONE ---

Exibe Saldo de Estoque: --- SELECIONE ---

VOLTAR ADICIONAR

Caso o Centro estocador for configurado como "Sim" deve-se informar o "Tipo de Unidade Hórus"

- * Almoarifado Central
- * Almoarifado Regional
- * Farmácia Unidade

No Cadastro de Setor, ao selecionar “Sim” para a opção “Centro Estocador” é possível visualizar o Tipo de Unidade Hórus. Esta opção é obrigatória para as operações do serviço Hórus. (Figura F.06)

Cidadão

Figura F.07

Para

Dados Básicos Dados Domicílio Outros Documentos Demais Dados | e-SUS

Cadastrado por: ADMINISTRADOR

Unidade: UNIDADE BASICA DE DE SAUDE DO JARDIM BO

CNS do Cidadão:

Prontuário:

Nome Completo:

Nome S

Data de Nascim

Nome da

Nome d

Estado

Telefone Celular:

Telefone de Recado:

E-mail:

Nacionalidade: Selecione

Raça/Cor: Selecione

Estratificação de Risco do Paciente

Para dispensações o CNS do cidadão deve ser devidamente cadastrado.

dispensações, o serviço Hórus obriga informar o CNS do cidadão conforme (Figura F.07)

Manual de Configurações do WebSocialSaúde – Serviço Hórus

Por Claiton Nazaret – Programador Elotech


Considerações

Verifique corretamente o cadastro no serviço Hórus solicitado através do endereço http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=33648

Os códigos CATMAT deverão ser corretamente informados conforme a tabela disponibilizada através do Portal da Saúde.

Erros de retorno do Hórus poderão ser visualizados através do menu Prog.Federais > Hórus > Log de Erros conforme (Figura F08)

Figura F.08

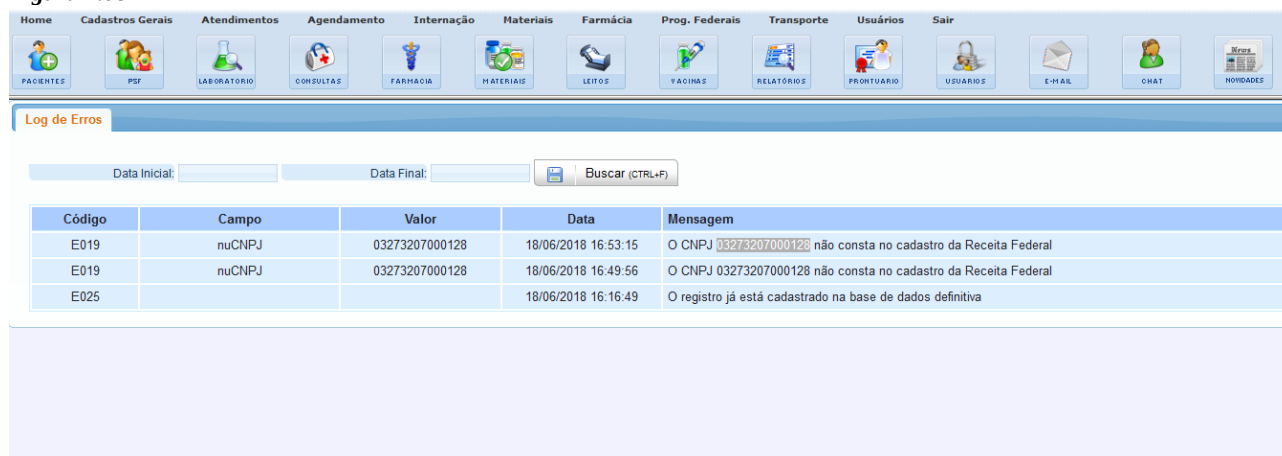

Código	Campo	Valor	Data	Mensagem
E019	nuCNPJ	03273207000128	18/06/2018 16:53:15	O CNPJ 03273207000128 não consta no cadastro da Receita Federal
E019	nuCNPJ	03273207000128	18/06/2018 16:49:56	O CNPJ 03273207000128 não consta no cadastro da Receita Federal
E025			18/06/2018 16:16:49	O registro já está cadastrado na base de dados definitiva

Logs mais específicos estão no arquivo de log localizado na pasta do sistema `\xampp\htdocs\WebSocialSaude\horus\log\horus.log`.

Dúvidas deverão ser encaminhadas para o suporte da Elotech.

